

Profil de rangement
replié Ultra-mince à

273mm



Rapide et facile
d'installation, il élimine
l'obstacle que constitue
l'escalier de votre maison

Profil Ultra-mince lorsque
replié contre le mur

Siège confortable
ajustable en largeur

Siège d'escalier K2 Savaria^{MD}

K2 - ALLEZ DROIT AU SOMMET

Le siège d'escalier K2 vous permet de demeurer à la maison et de franchir l'escalier sans tracas. Installé sur les marches en quelques heures seulement, ce siège motorisé vous transporte facilement sur une volée droite d'escalier. Le siège d'escalier K2 de Savaria est parmi les plus étroits du marché en se repliant sous 273 mm dans sa position de rangement contre le mur. Ceci vous permet d'emprunter votre escalier en toute liberté lorsque votre siège K2 n'est pas utilisé.

Grace à sa capacité de 159 kg et ses appuis-bras réglables en largeur, le K2 est bien adapté pour répondre à tous les besoins. Ses détecteurs d'obstacles, sa ceinture de sécurité à enrouleur automatique et son régulateur de vitesse ne sont que quelques-unes de ses nombreuses caractéristiques de sécurité. Les rails, pivot de siège et repose-pied peuvent aussi être motorisés en option pour une utilisation plus facile. Le K2 fonctionne en tout temps même en cas de panne de courant grâce à son système d'alimentation à batteries rechargeable. Il est offert dans un doux coloris blanc.



Siège d'escalier K2 Savaria^{MD}

K 2 – ALLEZ DROIT AU SOMMET




- Profile Ultra-mince de 273 mm dans sa position de rangement lorsque replié contre le mur
- Opération douce et silencieuse du système d'entraînement à pignon et crémaillère
- Alimentation à batteries rechargée aux extrémités du rail
- Voyants d'affichage DEL en façade pour un diagnostic facile
- Détecteurs d'obstacle sur l'appareil et sous le repose-pied permettant d'immobiliser le siège sur impact
- Siège pivotant et bloquant au palier supérieur pour une plus grande stabilité lors de l'embarquement
- Ceinture de sécurité enroulable et repose-pied antidérapant pour plus de sécurité
- Installation facile, vous permettant ainsi d'utiliser votre siège K2 rapidement
- Unité pouvant être installée des deux côtés de l'escalier. Elle est livrée avec deux commandes au palier et un bouton de contrôle sur l'appui-bras.
- Siège durable et confortable au coloris blanc avec appuis-bras ajustables jusqu'à 508 mm de largeur et capacité de 159 kg
- Options de motorisation : siège pivotant automatique au palier supérieur, repose-pied motorisé et rail pliable motorisé à distance incluant une détection de pression sécuritaire
- Options additionnelles : système de charge continu sur le rail, rail repliable au palier bas, palettes de pivot du siège, pied de soutien allongé pour rail au palier supérieur afin de diminuer l'espace requis, bouton d'arrêt d'urgence sur appui-bras, ensemble pour extérieur (conditions humides).

Dimensions variables selon l'angle d'inclinaison du rail :

A : 551 mm–564 mm (21,7 po–22,2 po)

B : 424 mm–439 mm (16,7 po–17,3 po)

C : 119 mm–127 mm (4,7 po–5 po)

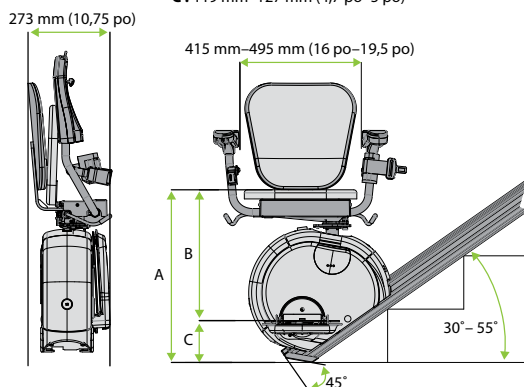

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Applications	Résidentiel, intérieur, volée droite d'escalier
Capacité	159 kg (350 lb) ¹
Course maximum linéaire	9 750 mm (32 pied)
Nombre de palier	2
Vitesse nominale	0,08 m/s (15 pi/min)
Système d'entraînement	Pignon et crémaillère, Moteur 0,25 kW, (1/3 HP), 24 VDC, Recharge des batteries sur alimentation domestique
Alimentation	100-240 VAC, 50/60 hz, monophasé
Finition	Peinture cuite électrostatique sur les pièces de métal et plastique ABS blanc doux
Largeur repliée	273 mm (10,75 po) ²
Largeur déployée	546 mm (21,50 po) ²
Plage d'inclinaison	30° à 55°
Garantie	24 mois sur les pièces, (voir conditions avec votre détaillant)

¹Pour les escaliers dont l'inclinaison est supérieure à 45°, capacité maximum de 136 kg

²Une dimension supérieure pourrait être exigée par les autorités locales/préfecture

Consulter un distributeur Autorisé Savaria afin de mieux comprendre tous les avantages du siège d'escalier K2.

Vous pourrez ainsi diminuer les coûts de construction et d'aménagement de votre domicile.

Votre distributeur local s'assurera que votre produit Savaria est en conformité avec les codes et normes de sécurité applicables.

Distributeur autorisé Savaria

 **savaria**^{MD}

www.savaria.com

3 Delessert, Paris, 75016, France

tel : +33 06 38 13 22 93